

ネブライザーシステム

- 小型軽量のネブライザーシステムです。
- 粒子サイズは50%が2.88 μ m以下です。(流量7L/分)
- 薬液平均投与量は0.35mL/分です。(推奨流量6~9L/分)
- チューブはキンク防止用に加工した2.1mシユアフローO₂チューブです。
- ラテックスフリーなので安心してお使いいただけます。

■ 届出番号 13B1X00008000003

ネブライザーマスクキット



- マスクでの吸入用キットです。
- キット内容:マスク、ネブライザー、2.1mシユアフローO₂チューブ
- マスクは軽量ソフトな素材です。

品番	用途	仕様	包装
HT1805	成人用 マスク吸入用	2.1mチューブ	25個/箱
HT1807	小児用 マスク吸入用	2.1mチューブ	10個/箱

ミニネブライザーキット




- マウスピースでの吸入用キットです。
- キット内容:マウスピース、Tピース、ネブライザー
- 2.1mシユアフローO₂チューブやフレックスチューブと組み合わせたキットもあります。

品番	用途	仕様	包装
HT1801	マウスピース吸入用	チューブなし	50個/箱
HT1806	マウスピース吸入用	2.1mチューブ	50個/箱

■ 承認番号 22000BZX00265000

シユアフローO₂チューブ

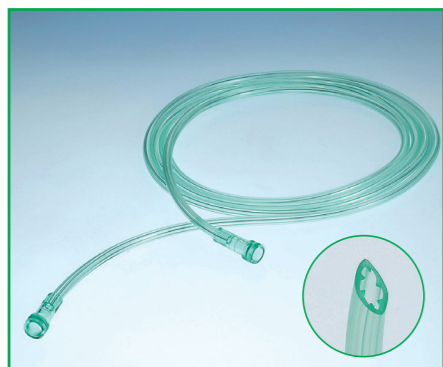

- チューブ素材は柔軟で扱いやすい酸素チューブです。
- キンク防止のため、内面を星形に加工してあります。
- コネクター部は柔軟性があるためしっかり接続できます。
- チューブは酸素用の透き通ったグリーン色です。

品番	仕様	包装
HT1115	酸素チューブ 2.1m	50個/箱
HT1118	酸素チューブ 4.2m	50個/箱
HT1119	酸素チューブ 7.6m	25個/箱
HT1110	酸素チューブ 10.0m	20個/箱

・本カタログに掲載の吸入酸素濃度は、呼吸の仕方により変化致しますので目安の値です。
・本カタログに掲載の製品仕様については、改良等により予告なしに変更することがあります。

AVION Medical 輸入先: エヴィオン メディカル社

●製造販売元
株式会社フジメディカル
〒160-0004
東京都新宿区四谷4丁目-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
http://www.fuji-medical.co.jp

●販売代理店

NP2016023000

LATEX FREE
ラテックスフリー

酸素吸入用マスク カニューレ



柔軟で軽量ソフトなやさしい素材です。

株式会社フジメディカル

豊富な品揃えで、用途にあったタイプを選択できます。


チューブとマスクはソフトな素材で扱いやすく設計されています。

全てのチューブはキンク防止のため内面加工したシュアフローO₂チューブを採用しました。

全ての素材はラテックスフリーなので安心してお使いいただけます。

■ 承認番号 22000BZX00265000

中濃度酸素吸入用マスク

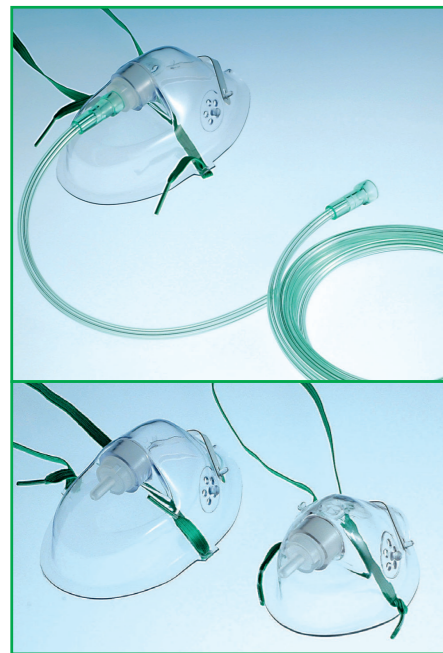


- 柔軟でソフト軽量な中濃度酸素マスクです。
- ノーズクリップは患者の輪郭に合わせフィットします。
- 2.1mのシュアフローO₂チューブ付きとチューブなしがあります。
- シュアフローO₂チューブはキンク防止用に内面を星形に加工してあります。
- チューブコネクターは柔軟性があり、しっかり接続できます。

酸素流量 L/分	酸素濃度 %
5~6	40
6~7	50
7~8	60

品番	用途	仕様	包装
HT1040	成人用	中濃度 チューブなし	50個/箱
HT1041	成人用	中濃度 2.1mチューブ	50個/箱
HT1042	小児用	中濃度 チューブなし	20個/箱
HT1043	小児用	中濃度 2.1mチューブ	20個/箱

高濃度酸素吸入用マスク

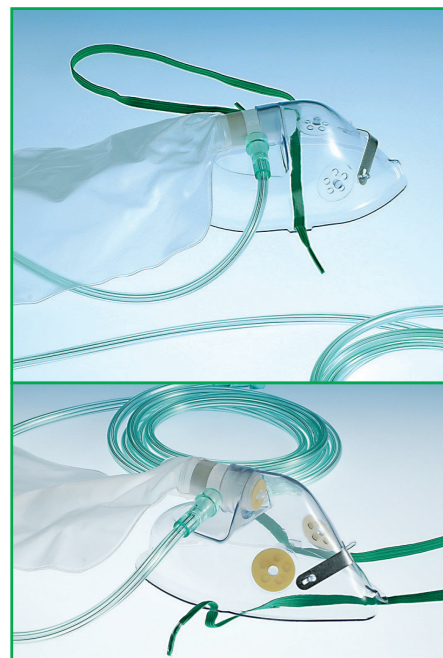


- 高濃度の酸素吸入に適したリザーバーバッグ付きのマスクです。
- キット内容: マスク、1Lリザーバーバッグ、2.1mシュアフローO₂チューブ
- 再呼吸タイプと非再呼吸タイプの2種類があります。
- 非再呼吸タイプは3カ所にバルブが付いています。(マスク2カ所、リザーバー1カ所)

再呼吸	酸素流量	10~12L/分	酸素濃度	60~80%
非再呼吸	酸素流量	10~12L/分	酸素濃度	90~98%

品番	用途	仕様	包装
HT1085	成人用	再呼吸 2.1mチューブ	25個/箱
HT1086	小児用	再呼吸 2.1mチューブ	10個/箱
HT1095	成人用	非再呼吸 3バルブ 2.1mチューブ	25個/箱
HT1096	小児用	非再呼吸 3バルブ 2.1mチューブ	10個/箱

エアロゾルマスク

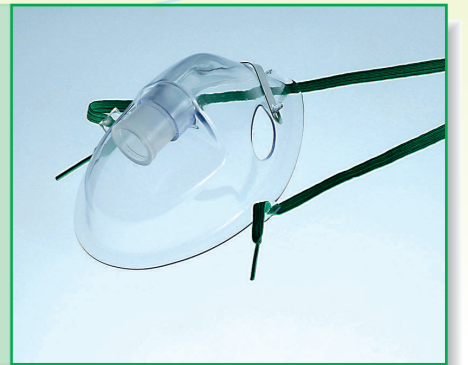

- エアロゾル療法用にデザインしてあります。
- 柔軟でソフト軽量な素材です。
- ノーズクリップは患者の輪郭に合わせフィットします。
- 内径22mmの蛇管と接続できます。

品番	用途	仕様	包装
HT1083	成人用	エアロゾル用 22mmコネクター	50個/箱
HT1080	小児用	エアロゾル用 22mmコネクター	20個/箱

トラキオストミーマスク



- 気管切開術後または喉頭切除術後のエアロゾル療法用にデザインしてあります。
- コネクターは360度回転式です。内径22mmの蛇管と接続できます。

品番	用途	仕様	包装
HT1060	成人用	エアロゾル気管切開用 22mmコネクター	50個/箱
HT1070	小児用	エアロゾル気管切開用 22mmコネクター	20個/箱

■ 承認番号 22000BZX00266000

ベンチュリー吸入用マスク




- 酸素濃度をダイリューターで設定できるベンチュリーマスクキットです。
- キット内容: マスク、15cmフレックスチューブ、ダイリューター6種、シュアフローO₂チューブ、エアロゾルアダプター

酸素濃度 %	24	28	31	35	40	50
ダイリューター色	青	黄	白	緑	赤	橙
推奨酸素流量 (L/分)	2	4	6	8	8	12
トータル流量 (L/分)	53	45	47	45	33	33

品番	用途	仕様	包装
HT1710	成人用	ベンチュリーキット 2.1mチューブ	25個/箱
HT1711	小児用	ベンチュリーキット 2.1mチューブ	10個/箱

■ 承認番号 22000BZX00264000

シルキーソフト酸素カニューレ

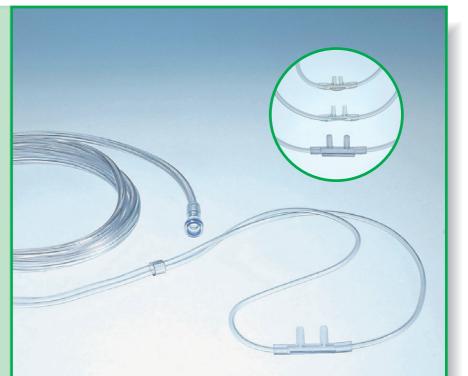

- 2.1mシュアフローO₂チューブ付の鼻カニューレです。
- 柔軟で軽量ソフトな素材です。
- チップ部は違和感を無くすため特に柔らかい素材を使用しています。
- チューブは内面が星形のシュアフローO₂チューブを使用していますので、柔軟でありながらキンクしずらく安心です。

品番	用途	仕様	包装	酸素流量 L/分	酸素濃度 %
HT1012	成人用	カニューレ 2.1m	50個/箱	2~4 4~6	25 40
HT1013	小児用	カニューレ 2.1m	20個/箱		
HT1014	新生児用	カニューレ 2.1m	20個/箱		