

ネクサス麻酔回路

NEXUS—Anesthesia Breathing Circuits

LATEX
FREE
ラテックスフリー

- ネクサス麻酔回路は、ラテックスフリーです。
- 適度な強度と軽量素材は、ディスプレイ回路
- 豊富な品揃えで、用途にあったタイプを選択できます。

コアキシャル

コアキシャル（二重管型）の特徴

- 麻酔回路の蛇管は、二重タイプです。呼気で吸気側の蛇管が加温される構造です。
- 麻酔中でも一本の蛇管のため邪魔になりません。
- 蛇管は接着してあり、外れません。また、流量抵抗も低く、従来の二重管の問題点を解決しました。
- 蛇管先端は、回転式コネクター付です。

品番	品種	仕様	包装
FJ61500	コアキシャル 1.5	1.5m 二重管	14個(箱)

医療機器認証番号:221AGBZX00195000



エクスパンドブル

エクスパンドブル（伸縮型）の特徴

- 麻酔回路の蛇管は、伸縮タイプです。麻酔中でも容易に引き伸ばすことができます。
- 成人用は、スーベールY字管です。回転式なので、術中でも自由に方向を変えることができます。
- 小児用のエクスパンドブルも品揃えしました。
- 梱包時の保管スペースは小さくなります。

品番	品種	仕様	蛇腹最大長	包装
FJ72F1200	エクスパンドブル 成人用	スーベールY・22mm 蛇管・伸縮型	1.8m	20個/箱
FJ60F1400	エクスパンドブル 小児用	Bi-Y 字管・15mm 蛇管・伸縮型	1.5m	20個/箱

医療機器認証番号:221AGBZX00195000




麻酔回路・呼吸バッグ・マスクは、全てラテックスフリーですので安心してお使いいただけます。

スタンダード麻酔回路

- 適度な強度と軽量の素材は、ディスプレイ回路として扱いやすく設計されています。
- 成人用、小児用ともに 1.5m です。
- ラテックスフリーです。
- ディスposableとしての使用を提案します。

品番	品種	仕様	包装
FJ601000	成人用1.5m	パラレルY字管・22 蛇管	20個(箱)
FJ601400	小児用1.5m	Bi-Y 字管・15 蛇管	15個(箱)

医療機器認証番号:221AGBZX00195000

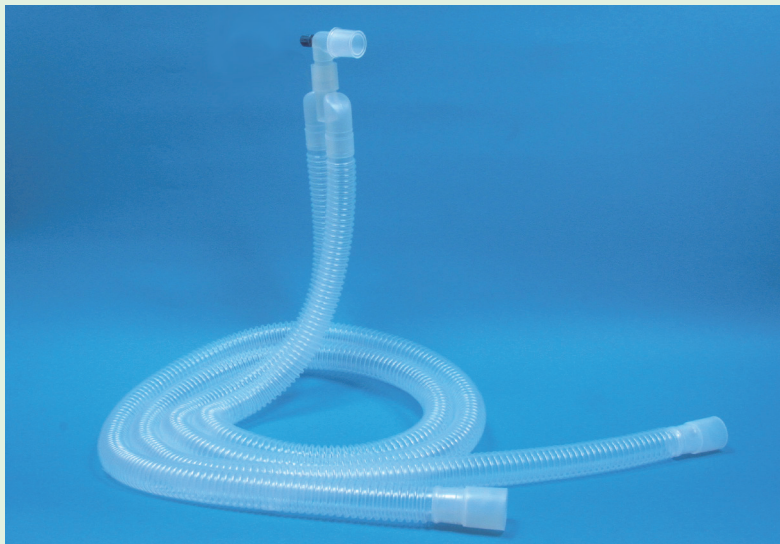

呼吸バッグ LPF

- ラテックスフリーです。
- ディスposableでありながら、高級な質感を実現しました。

品番	品種	包装
FJ3525-20	1/2L	20個(箱)
FJ3521-20	1L	20個(箱)
FJ3522-20	2L	20個(箱)
FJ3523-20	3L	20個(箱)

医療機器認証番号:221AGBZX00194000



ソフトフェイスマスク

- ラテックスフリーです。
素材はソフトで良くフィットします。

品番	品種	仕様	包装
FJ1015	新生児	バルブ付	10個(箱)
FJ1025	乳児用	バルブ付	10個(箱)
FJ1035	幼児用	バルブ付	10個(箱)
FJ1045	成人用S・小児用	バルブ付	10個(箱)
FJ1055	成人用M	バルブ付	10個(箱)

医療機器承認番号:220BZX00267000



⚠ 注意

使用上の注意

- 非導電性材質ですから、爆発性麻酔薬には用いないでください。
- 一人一回限りの使用です。再使用しないでください。

製造販売元

株式会社フジメディカル

〒160-0004
東京都新宿区四谷4丁目-1 細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377 FAX 03-3356-8380
<http://www.fuji-medical.co.jp>

販売代理店